

## **CORE-SCRUB WITH CHLOREXIDINE 4% (at 20% concentration)**

Scrub brush/with sponge used for hand cleaning disinfection.

### **Description**

Scrub brush with antiseptic solution, single use, used for hand and forearm disinfection of sanitary personnel. Contains 20 ml antiseptic soap and nail cleaner.

### **Indications**

Device made off a scrub brush, a sponge glued at the base and comes provided with nail cleaner. Used for disinfection of sanitary personnel and surgeons' nail, fingers, hands and forearm, participating in surgery. Exclusively for external use and on healthy and unhurt skin. Used in preoperative areas only.

### **Precaution**

Avoid contact with eyes. Do not swallow. Do not use any package with presents sealing. **DO NOT USE ON ANY OTHER PARTS OF THE BODY WHICH ARE NOT INDICATED IN THE PRESENT FILE.**

### **End-user**

Sanitary personnel only.



### **Warehouse**

To be protected from humidity and direct exposure to sunlight, store at max 40°C.

### **Instruction of use**

- Open the individual wrapping, where written "OPEN"
- Distribute the antiseptic solution equally on hands. Use the scrub only for nails and between fingers. Use the sponge for the skin areas.
- Brush and use sponge to disinfect starting from fingers, ending before reaching elbows. Take special care of areas between fingers and nails.
- Clear hands and forearm with running water holding up hands always higher than elbow. The entire procedure lasts 5 minutes.
- Discard scrub brush after use, as by residual protocols and local law application.



## TECHNICAL PROPERTIES

|                         |  |                 |            |                |
|-------------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| Material used           | BRUSH: PLD polyethylene<br>SPONGE: Polyurethane - medium high density<br>NAIL CLEANER: PET         |                 |            |                |
| Formula                 | Components   | Concentration % | No. CAS    | Risk sentences |
|                         | Chlorhexidine digluconate at 20%   | 4%              | 18472-51-0 | R36            |
|                         | OMISSIS  |                 |            |                |
| Certificates            | PMC Ministry of Health Italy: n° 19575 in compliance to 98/08/CEE                                  |                 |            |                |
| Scrub brush dimensions  | Lenght: mm 80 Width: mm 50 Height: mm 40   |                 |            |                |
| Nail cleaner dimensions | Lenght: mm 65 Widht: 5 to 10 mm  |                 |            |                |
| Packaging               | Boxes of 270 pcs - EWCS270P.<br>9 dispenser of 30 pieces; total: 270 pieces per outer box          |                 |            |                |
| Pack                    | Single piece of scrub brush with 20 ml antiseptic solution with nail cleaner, in termoforming pack |                 |            |                |
| Expiry Date             | 24 months  |                 |            |                |

### **LATEX FREE**

Not following the instructions may cause in an improper use of the product. Coremec reserves the right to amplify, modify and to improve the present technical file

### **COREMEC s.r.l.**

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

## Art. CS-270-C CORE-SCRUB C

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Codice Articolo</b> | CS-270-C   |
| <b>Misura</b>          | ===  |
| <b>N° Repertorio</b>   | N.A. IN QUANTO NO D.M. ma PMC :<br>Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010 |
| <b>Codice CND</b>      | N.A. IN QUANTO NO D.M. ma PMC :<br>Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010 |

### Descrizione

Spazzolino flessibile monouso con stilo netta unghie e con spugnetta intrisa di 20 ml di soluzione detergente disinfettante

### Indicazioni

Dispositivo destinato al lavaggio, pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie.

### Avvertenze

In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente, se necessario, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire *NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO.*


### Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

### Modo d'uso

- Aprire la confezione dal lato "APRIRE".
- Utilizzare la parte in spugna per distribuire omogeneamente la soluzione antisettica, abitualmente in uso, sulla superficie cutanea umida.
- Strofinare la cute di mani ed avambracci con particolare attenzione alle aree interdigitali per circa 5 minuti.
- Risciacquare abbondantemente mani e avambracci con acqua corrente.
- Gettare la spazzola dopo l'uso e smaltire secondo le disposizioni legislative in vigore.

Spazzolino flessibile con spugna

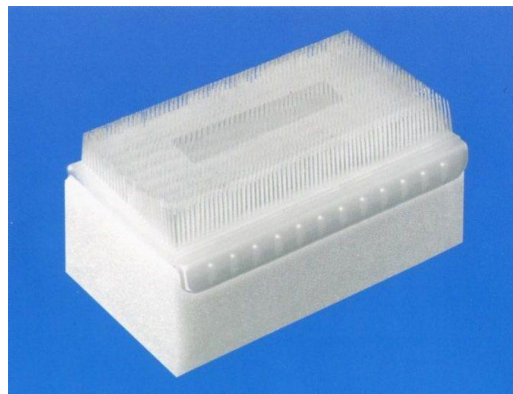


Etichetta della singola confezione



## Caratteristiche Tecniche

|  |  |
|--|--|
| Materiale Impiegato                      | SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide ad altezza differenziata<br>SPUGNA in poliuretano<br>PULISCI UNGHIE in pvc |
| Confezionamento                          | Singolo pezzo in involucro termosaldato  |
| Dimensione solo spazzola                 | Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 8 – 15  |
| Dimensione solo spugna                   | Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 25  |
| Dimensione complessiva Spazzola e spugna | Lunghezza mm 80 Larghezza mm 50 Altezza mm 40  |
| Dimensione pulisci unghie                | Lunghezza mm 60 Larghezza mm 10 Altezza mm 2   |
| Composizione per 100 g. di soluzione     | Gluconato di Clorexidina (20%) 4 g. (puro 0,8 g.)<br>Acqua deionizzata e coformulati q.b. a 100 g.                       |
| Unità di vendita                         | 9 box dispenser da 30 pz o box dispenser da 100 unità  |
| Scadenza                                 | Prodotto con validità 2 anni (24 mesi)   |
| Presidio Medico Chirurgico               | Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4535 del 13 gen. 2010                                    |

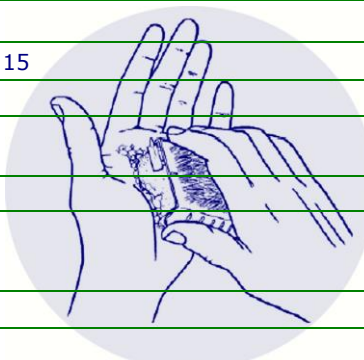

### LATEX FREE

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto. La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

### COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail:  
[export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)